

VITA ADIVA® LUTING SOLUTIONS

La soluzione di fissaggio specifica – intuitiva e sicura!



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 03.20

VITA – perfect match.


VITA

Descrizione del prodotto

VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS sono soluzioni di fissaggio appositamente ideate per i materiali VITA, per il fissaggio di restauri in ceramica feldspatica, ceramica ibrida, vetroceramica, biossido di zirconio, composito e metallo. Gli adesivi specifici integrati assicurano un legame adesivo affidabile. Il sistema intelligente e chiaramente strutturato consente

sicurezza procedurale ed efficienza di fissaggio grazie all'impiego intuitivo e semplice. Con il set a doppio tray, di formato normalizzato, tutti i componenti sono sempre a portata di mano del clinico e del suo team. Le soluzioni di fissaggio VITA ADIVA sono naturalmente indicate anche per materiali restaurativi di altri produttori.

TUTTE LE SOLUZIONI IN UN COLPO D'OCCHIO

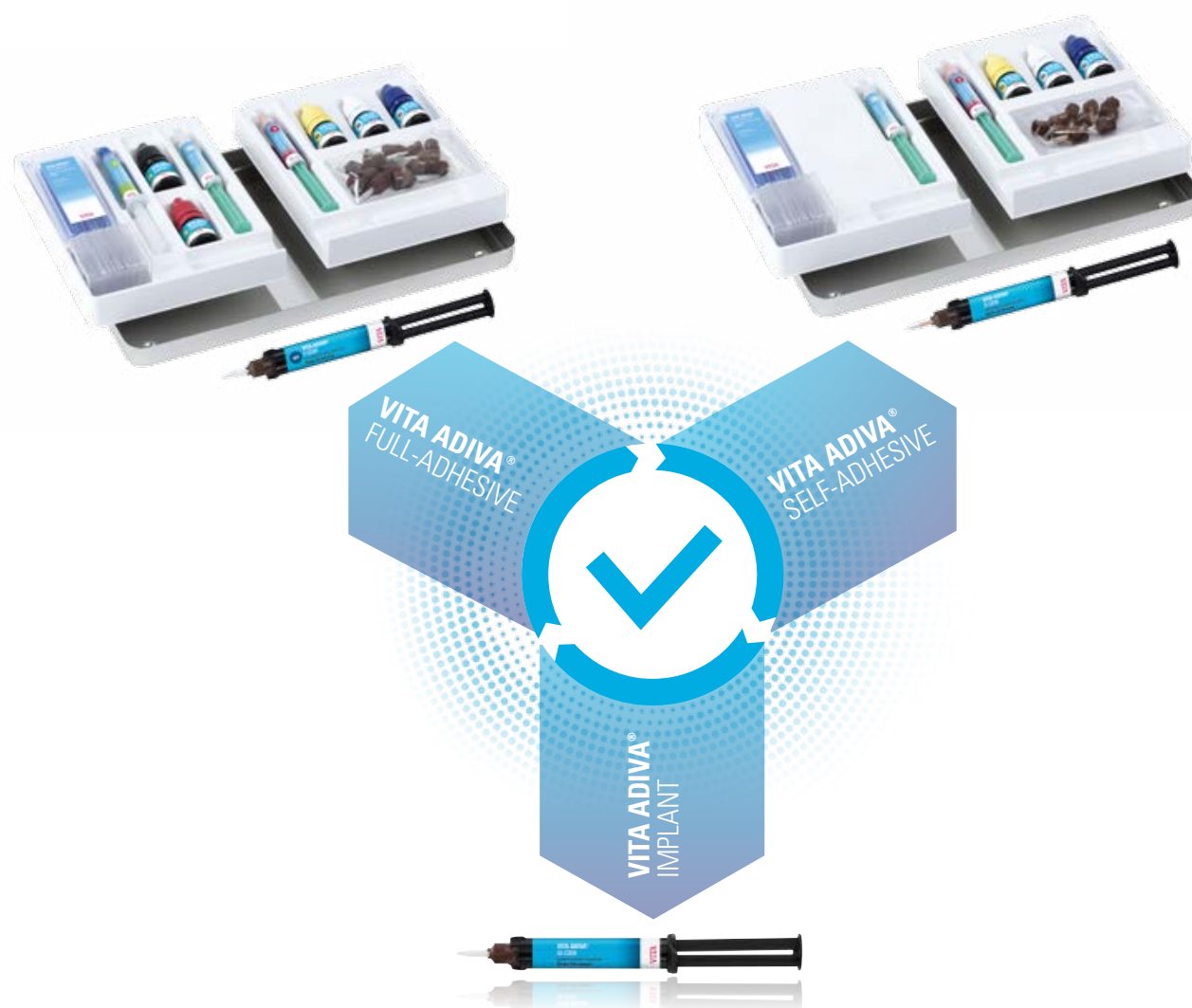

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE

- Il sistema di fissaggio adesivo con componenti perfettamente coordinati per il condizionamento della sostanza dentaria e del materiale di restauro.
- Il composito di fissaggio adesivo, a indurimento duale VITA ADIVA F-CEM è disponibile in quattro colori (A2 Universal, A3, White opaque, Translucent).

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE*

- Il sistema di fissaggio autoadesivo con componenti perfettamente coordinati per il condizionamento del materiale di restauro.
- Il composito di fissaggio autoadesivo, a indurimento duale VITA ADIVA S-CEM è disponibile in due colori (A2 Universal, Translucent).

VITA ADIVA® IMPLANT

- VITA ADIVA IA-CEM è un composito di fissaggio a indurimento duale, ultraopaco per l'incollaggio di corone su basi in titanio e abutments individuali in titanio.

VITA ADIVA® TEMPORARY

- VITA ADIVA TE-CEM è un cemento-resina a indurimento duale per il fissaggio provvisorio. E' disponibile nel colore Translucent.

*) VITA ADIVA S-CEM non ha certificazione FDA.

VANTAGGI



Affidabile

- Fissaggio adesivo affidabile di molteplici materiali restaurativi con adesivi specifici per i singoli materiali.

Sicurezza di processo

- Procedimento sicuro grazie alla chiara presentazione del set di fissaggio con componenti disposti sistematicamente e codificati cromaticamente.

Razionale

- Set a doppio tray, in formato normalizzato per avere tutti i componenti a portata di mano.

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING SET



VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING SET Cod. FAFAS

Denominazione	Quantità	Presentazione	Cod.*
VITA ADIVA TOOTH-ETCH**	3 ml	Siringa + 15 Application-Tips, blu	–
VITA ADIVA T-BOND I + II	5 ml	Flacone, 2 x	FATBS
VITA ADIVA CERA-ETCH**	3 ml	Siringa + 20 Application-Tips, rosso	FACE3
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Flacone	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Flacone	FAZRP5
VITA ADIVA M-PRIME	5 ml	Flacone	FAMP5
VITA ADIVA F-CEM, colore: A2 Universal	5 ml	Siringa + 15 T-Mixer 1:1, marrone	FAFCEMA25
VITA ADIVA OXY-PREVENT	3 ml	Siringa + 10 Application-Tips, verde	FAOP3
ACCESSORI VITA ADIVA: VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays			

VERSIONI VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING

Denominazione	Quantità	Presentazione	Cod.*
VITA ADIVA F-CEM, colore: A2 Universal	5 ml	Siringa + 15 T-Mixer 1:1, marrone	FAFCEMA25
VITA ADIVA F-CEM, colore: A3	5 ml	Siringa + 15 T-Mixer 1:1, marrone	FAFCEMA35
VITA ADIVA F-CEM, colore: White opaque (bianco opaco)	5 ml	Siringa + 15 T-Mixer 1:1, marrone	FAFCEMW05
VITA ADIVA F-CEM, colore: Translucent	5 ml	Siringa + 15 T-Mixer 1:1, marrone	FAFCEMT5


ACCESSORI VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE

Denominazione	Quantità	Cod.*
VITA ADIVA Microbrush	25 pz.	FAMB25
VITA ADIVA Mixing-Trays	25 pz.	FAAT25
VITA ADIVA T-Mixer 1:1	15 pz.	FATM11

*) Tutti i componenti VITA ADIVA possono essere ordinati singolarmente con i codici indicati.

**) Awertenza: Ricambi VITA ADIVA TOOTH-ETCH: siringhe 2 x 3 ml, cod. FATE3; VITA ADIVA CERA-ETCH è disponibile anche in flacone da 6 ml, cod. FACE6

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING SET

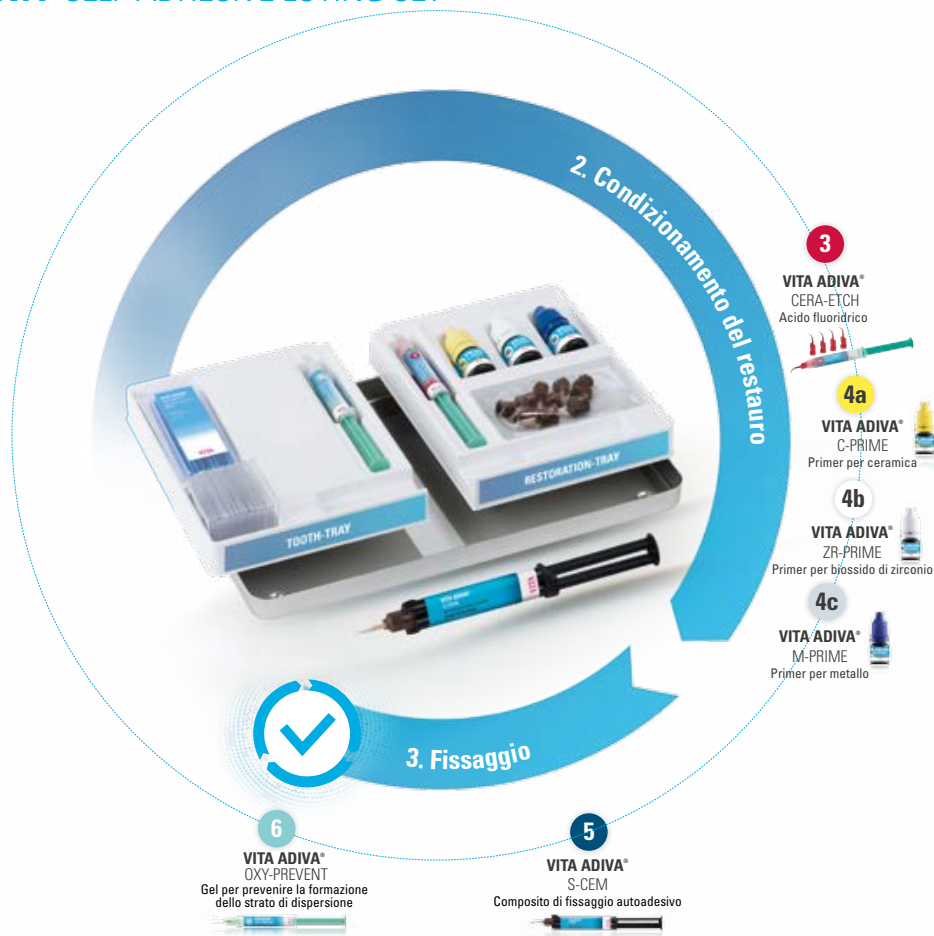

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING SET Cod. FASAS

Denominazione	Quantità	Presentazione	Cod.*
VITA ADIVA CERA-ETCH**	3 ml	Siringa + 20 Application-Tips, rosso	FACE3
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Flacone	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Flacone	FAZRP5
VITA ADIVA M-PRIME	5 ml	Flacone	FAMP5
VITA ADIVA S-CEM, colore: A2 Universal	5 ml	Siringa + 15 T-Mixer 4:1, marrone	FASCEMA25
VITA ADIVA OXY-PREVENT	3 ml	Siringa + 10 Application-Tips, verde	FAOP3
ACCESSORI VITA ADIVA: VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays			

VERSIONI VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING

Denominazione	Quantità	Presentazione	Cod.*
VITA ADIVA S-CEM, colore: A2 Universal	5 ml	Siringa + 15 T-Mixer 4:1, marrone	FASCEMA25
VITA ADIVA S-CEM, colore: Translucent	5 ml	Siringa + 15 T-Mixer 4:1, marrone	FASCENT5

ACCESSORI VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE

Denominazione	Quantità	Cod.*
VITA ADIVA Microbrush	25 pz.	FAMB25
VITA ADIVA Mixing-Trays	25 pz.	FAAT25
VITA ADIVA T-Mixer 4:1	15 pz.	FATM41

*) Tutti i componenti VITA ADIVA possono essere ordinati singolarmente con i codici indicati.

**) Awertenza: VITA ADIVA CERA-ETCH è disponibile anche in flacone da 6 ml, cod. FACE6

VITA ADIVA® IA-CEM e TE-CEM



VITA ADIVA® IA-CEM SET cod. FAIACEMSET

Denominazione	Quantità	Presentazione	Cod.*
VITA ADIVA IA-CEM, colore: Ultra opaque	5 ml	Siringa + 15 T-Mixer 1:1, marrone	FAIACEMU05
VITA ADIVA CERA-ETCH	6 ml	Flacone	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Flacone	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Flacone	FAZRP5
ACCESSORI VITA ADIVA IA-CEM: VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays			

ACCESSORI VITA ADIVA® IA-CEM


Denominazione	Q.tà	Cod.*
VITA ADIVA T-Mixer 1:1	15 pz.	FATM11
VITA ADIVA Microbrush	25 pz.	FAMB25
VITA ADIVA Mixing-Trays	25 pz.	FAAT25

VITA ADIVA® TE-CEM

Denominazione	Quantità	Presentazione	Cod.
VITA ADIVA TE-CEM, Translucent	5 ml	Siringa + 15 T-Mixer 4:1, marrone	FATECEM5

*) Tutti i componenti VITA ADIVA possono essere (ri)ordinati singolarmente con i codici indicati.

COLORI E VARIANTI

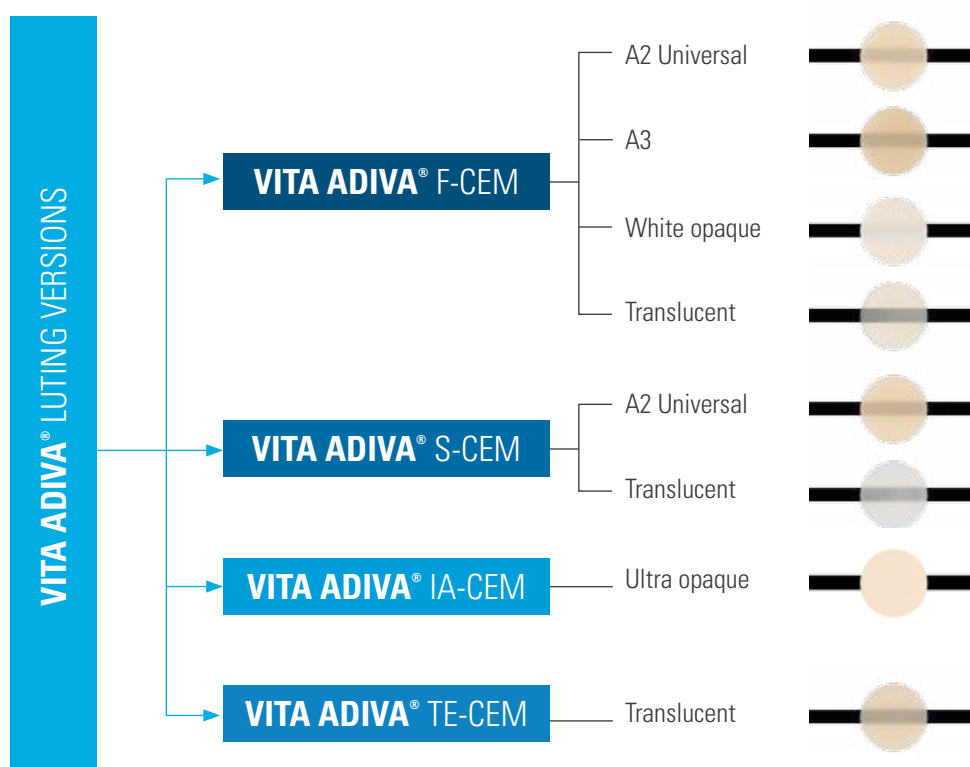






RACCOMANDAZIONI DI FISSAGGIO SPECIFICHE PER MATERIALE

Materiale VITA CAD/CAM	Classe merceologica	Tipo di fissaggio / composito				
		adesivo	autoadesivo	adesivo	convenzionale	provvisorio
		VITA ADIVA® F-CEM	VITA ADIVA® S-CEM	VITA ADIVA® IA-CEM		VITA ADIVA® TE-CEM
VITABLOCS	Ceramica feldspatica	●	● ¹	○	X	X
VITA ENAMIC	Ceramica ibrida	●	● ¹	●	X	X
VITA SUPRINITY PC	Ceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio	●	●	●	○ ²	X
VITA YZ T	Biossido di zirconio	●	●	●	●	●
VITA YZ HT	Biossido di zirconio	●	●	●	●	●
VITA YZ ST	Biossido di zirconio	●	●	●	●	●
VITA YZ XT	Biossido di zirconio	●	●	●	●	●
VITA CAD-Temp	Composito	○	X	●	○	●
-	Leghe non nobili, leghe nobili, titanio	●	●	●	●	●

● raccomandato ○ possibile X impossibile

TABELLA INDICAZIONI

	VITA ADIVA® F-CEM	VITA ADIVA® S-CEM	VITA ADIVA® IA-CEM	VITA ADIVA® TE-CEM
	Cemento composito adesivo definitivo	Cemento composito autoadesivo definitivo	Cemento adesivo duale per protesi implantari	Composito di fissaggio provvisorio
	●	●	●	●
	●	X	X	X
	●	X	X	X
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●


● raccomandato X impossibile

Avvertenze:

¹) Compositi di fissaggio autoadesivi possono essere utilizzati per ceramica silicatica e ceramica ibrida esclusivamente in caso di corone.

²) Materiali di fissaggio convenzionali (ad es. Ketac CEM, 3M ESPE, Vivaglass CEM, Ivoclar Vivadent, GC Fuji I, GC Dental) possono essere usati esclusivamente per corone su monconi dentari naturali. Per il fissaggio convenzionale la preparazione deve presentare superfici ritentive e forma anatomica ridotta secondo le direttive di preparazione, attenendosi agli spessori prescritti.

Per ulteriori informazioni su VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS consultare: www.vita-zahnfabrik.com/adiva

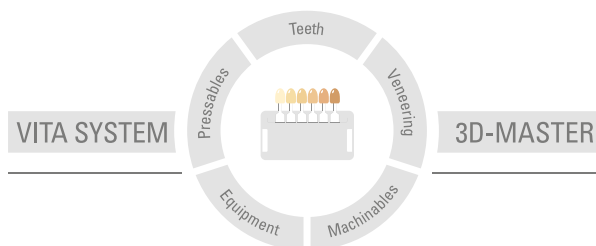

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 03.20

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati:

CE 0482

VITA ADIVA® F-CEM, **VITA ADIVA®** S-CEM, **VITA ADIVA®** IA-CEM, **VITA ADIVA®** TE-CEM, **VITA ADIVA®** TOOTH-ETCH, **VITA ADIVA®** T-BOND I + II, **VITA ADIVA®** C-PRIME, **VITA ADIVA®** ZR-PRIME, **VITA ADIVA®** M-PRIME

Harvard Dental International GmbH è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati :

CE

VITA ADIVA® Microbrush®, **VITA ADIVA®** T-Mixer™

VITA Zahnfabrik è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati

CE

VITA ADIVA® OXY-PREVENT

Microbrush® è un marchio della MICROBRUSH® INTERNATIONAL.

T-Mixer™ è un marchio della Sulzer Mixpac AG.

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik